


Držiak na fľašu na moč

Záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia, normálneho opotrebenia alebo používania, ako aj porúch, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu alebo použiteľnosť produktu. Technické zmeny spôsobia všeobecnú neplatnosť záruky

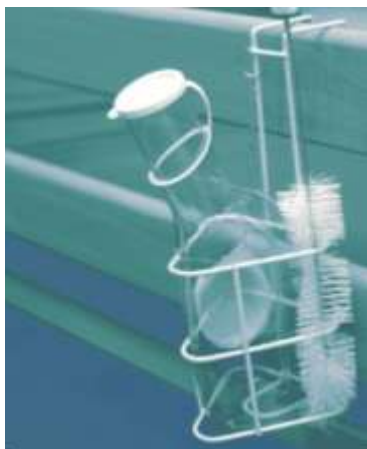

Sada fľaštičiek na moče so štetcom

Tip:

Na odstránenie starých pretrvávajúcich zápachov a škvŕn od moču vám odporúčame sprej na hygienu „URI-GO“
Obj. č.: 49 000



Držiak na fľašu na moč

»STANDARD«

Obj. č. 47 300 s vekom

Obj. č. 47 301 bez veka



Držiak na fľašu na moč **»ŠTVORCOVÝ«**

Obj. č. 47 320



Držiak na fľašu na moč

»OKRÚHLÝ«

Obj. č. 47 310



Držiak na fľašu na moč **»UNIVERZÁL«**

Obj. č. 47 330



Využitie:

Močové fľaše slúžiť ako dobrá pomoc pre pacientov pripútaných na lôžko, pre ktorých je použitie WC obtiažne alebo dokonca nemožné. Pre ľahký prístup, ako je napríklad fľaša držiak fiaš moču je namontovaný na lôžku pacienta a umožňuje samostatnú manipuláciu.

Pred prvým použitím: Skontrolujte úplnosť a prípadne poškodenie.

Použitie:

- Držiak na fľaše na moč zaveste ohnutou časťou smerujúcou nadol na rám postele. Ak je pacient schopný samostatne používať fľašu na moč, držiak by mal byť umiestnený v dosahu, aby bola ľahko dosiahnutá fľaša.
- Po použití môže byť fľaša na moč vrátená do držiaka. Držiak s obj. číslom 47 300 má upevnené dodatočné veko reťazového držiaku, ktoré je možné použiť ako uzáver (Pozor, dezodoračné, žiadna ochrana úniku!)
- Sestra potom môže odstrániť fľašu s močom a vyprázdniť.
- Po vyprázdnení do toalety vyčistíte fľašu moču a v prípade potreby ju dezinfikujete.

Čistenie a dezinfekcia:

- Držiak na fľaše na moč by sa mal čistiť alebo dezinfikovať aspoň raz za deň, ak je to potrebné častejšie.
- Čistenie sa môže vykonať teplou mydlovou vodou alebo miernym čistiacim prostriedkom pre domácnosť a handrou. Vysušte ju (nechajte ju odpočívať) a zaveste ju na rám lôžka na ďalšie použitie.
- Komerčne dostupné dezinfekčné prostriedky bez obsahu chlóru sa môžu použiť na dezinfekciu všetkých uvedených výrobkov. Dôležité upozornenie: Pri používaní dezinfekčných prostriedkov je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.

Doba použiteľnosti je približne 10 rokov, v zásade je možné opakované použitie.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred prvým použitím treba fľaštičku na moču vyčistiť a skontrolovať jej možné poškodenie.
- Veko držiaka fľaše na moč slúži iba na potlačenie zápachu a neponúka žiadnu ochranu proti úniku!
- Opatrovateľ musí používať ochranné rukavice.

Držiak na fľašu na moč »STANDARD«

Obj. č. 47 300 s vekom - Kovový rám s plastovým povrchom

Obj. č. 47 301 bez veka - vhodné pre fľaše na moč pre mužov (bez rukoväte)



Rozmery: asi 13 x 13 cm, celková výška: asi 33 cm




Držiak na fľašu na moč »OKRÚHLÝ«

Obj. č. 47 310 biely - kovový rám s plastovým povrchom

- vhodné pre fľaše na moč pre dámy (bez rukoväte)



Rozmery: priemer 13 cm, celková výška: 22cm

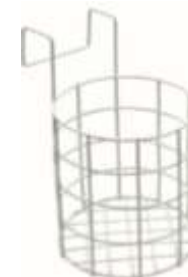

Držiak na fľašu na moč »ŠTVORCOVÝ«

Obj. č. 47 320 biely - kovový rám s plastovým povrchom

- vhodný pre netesné močové fľaše



Rozmery: priemer 14 x 15 cm, celková výška: 22cm



Držiak na fľašu na moč »UNIVERZÁL«

Obj. č. 47 330 chróm - kovový rám, chrómovaný - flexibilný

- vhodný pre všetky bežné fľaše na moč



Rozmery: priemer 13 x 10 cm, celková výška: 32cm

