


Hrazda k posteli

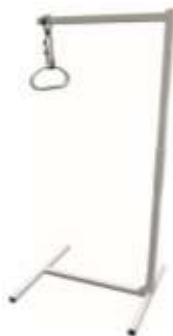

Obj. č.: 46 000

(HMV-č. 19.40.02.2021)

(HMV-č. 50.45.02.2021)

Určenie:

Táto pomôcka (hrazda k posteli) je pre ľudí, ktorí nemôžu bezpečne sedieť, alebo sa nemôžu postaviť z postele bez pomoci. Na bezpečné postavenie sa z postele sú potrebné zvyškové sily hornej časti tela a ramien.

Indikácia:

Posadiť sa na posteľ bez pomoci, zdvihnúť bedrá na posteli, otočiť sa na invalidnom vozíku alebo toaletnom kresle atď.

Kontraindikácie:

poranenie chrbta, apoplexia, hemiplegia

Pred prvým použitím:

Odstráňte obsah z krabice. Pred montážou skontrolujte všetky časti konštrukcie. Ak dôjde k poškodeniu pri preprave – NEPOUŽÍVAJTE pomôcku. Obráťte sa na predajcu / operátora o ďalšie pokyny.

Využitie:

Stožiar na lôžku musí byť umiestnený pri hlave lôžka. Pred každým použitím ošetrovateľ musí skontrolovať správnu montáž popruhu.

- Pól na prídavnom lôžku musí byť umiestnený na konci hlavy lôžka. Nosné rameno musí byť umiestnené paralelne k posteli.
- Rukoväť musí byť nastavená do príslušnej výšky, mala by byť pri zavesení vo výške brady / hrudníka.
- Stožiar s nadmorskou výškou musí byť naplnený iba vertikálne.
- Nehýbte sa zo strany na stranu, nebezpečenstvo preklopenia!
- Ak sa chcete obrátiť na invalidnom vozíku alebo toaletnom kresle, opatrovateľ musí poskytnúť pacientovi pomoc.

Čistenie a starostlivosť:

Všetky časti je odporúčané čistiť vlhkou handričkou pomocou jemných čistiacich prostriedkov. Nepoužívajte žiadne abrazívne alebo ostré predmety ani spotrebiče na čistenie. Pri starostlivosti o plastové časti odporúčame špeciálne čistiace prostriedky na plast. Lôžko môže byť dezinfikované komerčným dezinfekčným prostriedkom bez chlóru.

Dôležité upozornenie: Pri použití dezinfekčných prostriedkov je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.

Informácie na opätovné použitie:

Pred opätovným použitím sa musia dodržiavať pokyny Smernice o zdravotníckych pomôckach, čistiace prostriedky na ochranu proti slnečnému žiareniu na ochranu pred hygienou a prevenciou infekcie.

Údržba:

Min. 1 x za mesiac prekontrolujte všetky súčasti hrazdy, najmä zvary a ruky. Pravidelne kontrolujte remeň popruhu, poškodené diely ihneď vymeňte.

Bezpečnostné pokyny:

- Skôr ako použijete hrazdu, skontrolujte silu popruhu a rukoväť.
- Dodržte maximálne zaťaženie / trakciu (100 kg).
- Nehýbte sa zo strany na stranu, nebezpečenstvo preklopenia!
- Posuvný stĺp musí byť umiestnený rovnobežne s lôžkom, nie krížovo!
- Montáž iba podľa obrázka!
- Posuvný stĺp sa smie používať iba na rovnej ploche!
- Ak sú časti pokrčené, majú trhliny alebo deformácie, hrazda sa nesmie používať!
- Hrazda nie je hračka! Nenechávajte deti bez dozoru s hrazdou!
- Preprava hrazdy len v rozobratom stave.
- Neupevňujte iné veci ani predmety na hrazdu nad lôžkom!

Záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov. Výnimkou zo záruky sú chyby vyplývajúce z prirodzeného opotrebenia, zámeru, nedbanlivosti alebo nesprávnej manipulácie alebo použitia a nedostatkov, ktoré ovplyvňujú hodnotu alebo použiteľnosť nástroja len zanedbateľne. Vyhradujeme si právo na zmeny, ktoré slúžia technickému zlepšeniu.


Montáž:

Hrazda k posteli sa dodáva predmontovaný. Môžete ho nainštalovať bez použitia náradia, jednoducho umiestnite štvorcové rúry do seba (pozri obrázok). Dávajte pritom pozor, aby sa pás nachádzal medzi vodiacími kolíkmi.

Technická špecifikácia:

Materiál: potiahnutá oceľová rúrka,
plastová rukoväť

Farba: Sivá
Rozmery: 82 x 75 cm
Celková výška: 170 cm
Popruh na nastavenie výšky: 34 – 50 cm
Váha: 11 kg
Maximálne zaťaženie: 10 kg
Životnosť: 10 rokov

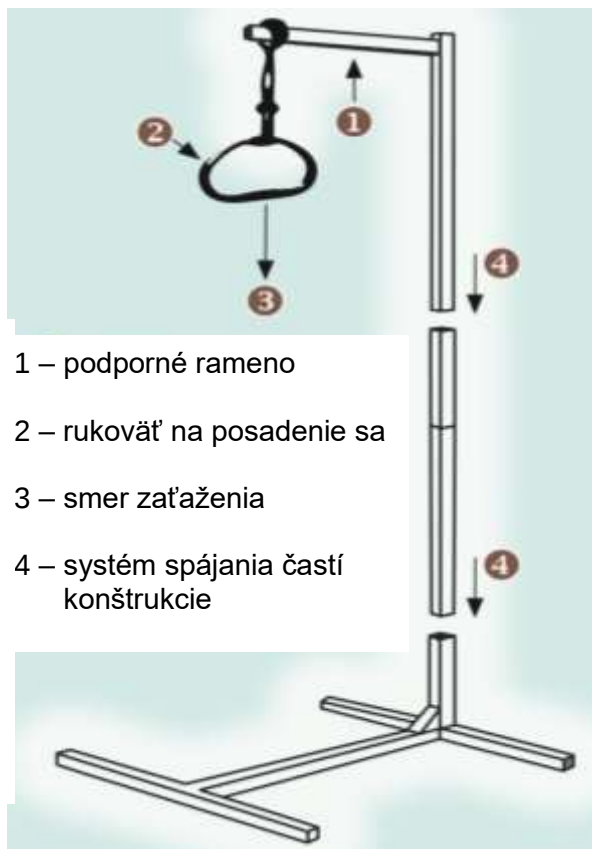

1 – podporné rameno

2 – rukoväť na posadenie sa

3 – smer zaťaženia

4 – systém spájania častí konštrukcie